

# DESCUBRA **BYAS**

PROFESSIONAL HOME BEAUTY HI-TECH



INFORMACIÓN DE PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE USO



## BYAS SENSATION SYSTEM

Hoy en día, las tecnologías modernas hacen posible que en el ámbito del rejuvenecimiento de la piel se puedan alcanzar resultados óptimos con métodos suaves para el cuidado de la piel y los tejidos. Pionero de este desarrollo en el ámbito de Natural Skin Rejuvenation es **BYAS**.

Con el **Bionic Youth Activating System**, las más recientes y modernas tecnologías de rejuvenecimiento de la piel empleadas por las clínicas de belleza ahora son asequibles para cualquier persona y pueden ser aplicadas de manera fácil y cómoda en su propia casa con el innovador aparato manual.

Estas breves instrucciones de uso le proporcionan una primera vista general sobre el concepto de acción integral de fases múltiples altamente efectivo **BYAS SENSATION**.

Descubra el auténtico secreto de belleza de las estrellas.  
Revolucionario, altamente efectivo y asequible.

Ahora también para usted.

## DISCOVER BYAS – PROFESSIONAL HOME BEAUTY HI-TECH

### ÍNDICE DE CONTENIDO:

- 02 | El BYAS MPST® Face Lifter
- 03 | El sistema integral de acción de fases múltiples BYAS SENSATION
- 05 | Funciones y programas
- 07 | Indicaciones de aplicación
- 08 | Plan de aplicación: Semana 1 - 8
- 09 | Indicaciones de advertencia y uso
- 10 | Contraindicaciones
- 11 | Conformidad

DESCARGA  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
COMPLETO BYAS FACE LIFTER:

[HTTP://WWW.WELLSTAR-COMPANY.COM/  
DOWNLOAD.HTML](http://www.wellstar-company.com/download.html)

# EL BYAS MPST® FACE LIFTER

SIMBIOSIS PERFECTA DE LAS TECNOLOGÍAS DE BELLEZA MÁS MODERNAS.

La exclusiva Multi Pro Synchron Technology® del Face Lifter combina tecnologías que ya se vienen utilizando con éxito desde hace años en clínicas e institutos especializados en el ámbito internacional para el rejuvenecimiento profesional de la piel, todo ello en un innovador aparato manual.\*

## IONTOFORESIS

El BYAS Face Lifter emplea el principio de acción de la iontoforesis.

De manera contraria a la mayoría de los aparatos de iontoforesis, que funcionan con programas de corriente pulsátil tradicionales, la **High Level Ion Flow Technology (HLIFT)** de que para los programas de iontoforesis del BYAS Face Lifter se encuentre disponible corriente continua constante. De esta manera, los agentes activos ionizados de los sueros especiales BYAS, tales como, por ejemplo, el complejo de hialurónico-aminoácido altamente efectivo, son transportados de una manera altamente eficaz hasta las capas más profundas de la piel. Así, el estudio realizado por una clínica universitaria alemana ha demostrado que después de tan sólo una semana de tratamiento con el Face Lifter se encontró hasta un 900% más de hialurónico en las capas más profundas de la piel.

La **Low Sensitivity Ion Circuit Technology (LSICT)** permite alcanzar en los programas de iontoforesis valores de máximo rendimiento, sin que se produzcan reacciones cutáneas incluso en pieles sensibles. Electrodo de acero fino de alta calidad, el mismo que se emplea en el ámbito técnico médico, conducen la corriente

requerida para la iontoforesis en un circuito a través del cuerpo entero y de regreso al rostro. De esta manera se previene la formación de circuitos de corriente directamente sobre la piel la cara, que de otra manera podrían resultar en reacciones dolorosas.

## EEM

El BYAS Face Lifter dispone además de programas para la estimulación eléctrica de los músculos.

La **Low Frequency Electrical Muscle Stimulation Technology (LF-EMS)** del BYAS Face Lifter tonifica y fortalece los músculos faciales de manera altamente efectiva. La LF-EMS es perfectamente tolerada incluso por los tipos de piel más sensibles. La activación pulsátil de baja frecuencia está adaptada especialmente a las pequeñas y sensibles estructuras musculares de la piel facial humana.

## RADIOFRECUENCIA

Como tercera a tecnología básica, el BYAS Face Lifter emplea la radiofrecuencia.

Debido al efecto térmico de las ondas de radiofrecuencia en el tejido conjuntivo dérmico, las fibras de colágeno se contraen. De esta manera se estira la piel ubicada encima. Adicionalmente, el **High Radio-Frequency Triglyceride Absorption System (HRFTAS)** del BYAS Face Lifter hace que también se alcancen las capas dérmicas más profundas y que las células adiposas localizadas allí sean llevadas a un estado de mayor permeabilidad. De esta manera, determinados componentes de las células adiposas, los así llamados triglicéridos, salen al exterior y las células adiposas terminan haciéndose más delgadas.

Con el BYAS HRFTAS, la remodelación visible de la línea facial natural es posible para cualquier persona, sin necesidad de operaciones caras y peligrosas.

## MICROVIBRACIÓN

El Face Lifter combina los programas de iontoforesis y EMS con el procedimiento de microvibración. Para las agrupaciones celulares de la piel, la microvibración representa un masaje de profundidad. Adicionalmente se mejora la cohesión estructural de las capas tisulares en su totalidad.

# EL SISTEMA INTEGRAL DE FASES MÚLTIPLES BYAS SENSATION

## BASIC

Para clientes con edades de hasta 35 años

### FASE 1

Limpieza y desintoxicación de la piel

Las impurezas son llevadas por iontoforesis negativa desde la profundidad de los poros dérmicos hasta la superficie de la piel, de tal manera que la piel se prepara perfectamente para el subsiguiente tratamiento de profundidad con las sustancias activas altamente efectivas de los sueros BYAS.  
Programa Face Lifter IO: CLEAN.

### FASE 2


Tratamiento profundo y reestructuración de la piel

El complejo de ácido hialurónico del suero BYAS es transportado mediante iontoforesis positiva hasta la profundidad de la piel. De esta manera, la piel recibe más humedad y se reestructura en su totalidad.  
Programa Face Lifter IO: NUTRI.

### FASE 3

Protección y renovación de la piel

Un acabado perfecto en el cuidado de las capas superiores de la piel es proporcionado por la combinación de algas marinas especialmente seleccionadas, que durante el día actúa eficazmente para combatir los radicales libres y durante la noche regenera la piel.

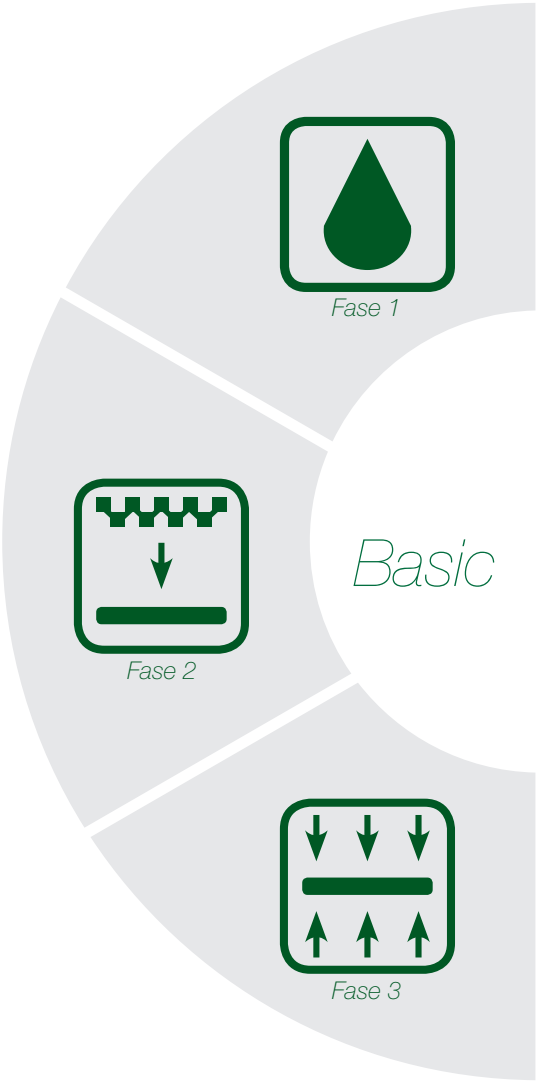

## PROFESSIONAL

Fases adicionales para clientes a partir de 35 años con mayores exigencias



Fase 4

### FASE 4 Natural Shaping

Se reduce la grasa facial y se contornea la línea facial natural mediante ondas de radiofrecuencia, que debido a su longitud de onda específica incluso alcanzan la piel subcutánea.

Programa Face Lifter RF:  
SHAPE + STRET.



Fase 5

### FASE 5 Natural Lifting

El tejido flojo y los músculos blandos se fortalecen mediante un tipo especial de estimulación muscular eléctrica (EEM), la cual emplea una activación pulsátil de baja frecuencia, adaptada especialmente para los sensibles músculos faciales.

Programa Face Lifter EEM:  
LIFT+FIRM.



Fase 6

### FASE 6 Relajación profunda de los músculos de la mímica

Las arrugas de mímica o arrugas de expresión son reducidas efectivamente por el primer Galvanic Mask System para capas profundas en todo el mundo. Aún así, la piel conserva su apariencia natural, debido a un extraordinario agente relajante de la musculatura facial que desarrolla su efecto completo durante la noche, tan pronto haya sido transportado a la piel más profunda mediante iontoforesis positiva.

Programa Face Lifter IO: MASK.

Pro

# BREVE RESUMEN FUNCIONES Y PROGRAMAS

El Face Lifter puede ser ajustado perfectamente a los requerimientos concretos de su piel.

El Face Lifter dispone de 3 programas de iontoforesis, 2 programas de EEM y 2 programas de radiofrecuencia. Los programas de iontoforesis y EEM trabajan de forma paralela al procedimiento de microvibración. En todos los programas se pueden seleccionar 3 intensidades de acción. Un total de 21 programas le ofrecen un máximo nivel de cuidado sistémico profesional para su piel. Elija usted mismo.

Haga las aplicaciones con el BYAS Face Lifter exclusivamente con los productos especiales BYAS.

## 1. Seleccionar programas de iontoforesis

Purificación, nutrición y reconstrucción de las capas profundas de la piel

## 2. Seleccionar programas de EEM

Tonificación de la musculatura facial

## 3. Seleccionar programa de RF

Tecnología profesional con 1 mHz a 500 kHz para tensar el tejido y eliminar grasa

## 4. Indicación de intensidad / estado de funcionamiento

Indicación del nivel de intensidad y del estado de funcionamiento actual (activo, stand-by)

## 5. Seleccionar intensidad

Intensidades de funcionamiento "Low", "Medium", "High". El botón está ubicado de manera invisible desde el exterior debajo de la elegante cubierta de silicona.

## 6. Indicación de tiempo del programa


Temporizador integrado que determina cada programa de forma segura

## 7. Símbolo de batería

Indicación del estado de carga actual

## 8. Botón multifunciones

On/Off, inicio, pausa y continuar programas. El botón está ubicado de manera invisible desde el exterior debajo de la elegante cubierta de silicona.

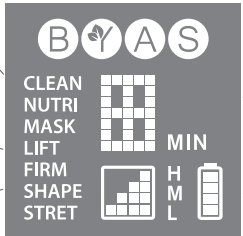



#### 9. Electrodo de tratamiento dual

Electrodos conectados en paralelo, hechos de acero fino de alta calidad, para la transmisión de la innovadora Multi Pro Synchron Technology®\*

#### 10. Control automático de temperatura y efectividad

Máxima seguridad de tratamiento debido a la constante medición de la temperatura que durante los programas de RF se realiza por medio de los electrodos de tratamiento duales. Regulación automática de la potencia en caso de exceder o no alcanzar la temperatura (Automatic Temperature Security and Efficacy Control, ATSEC).

#### 11. Conexión para conector Mini USB

En lugar de usar el zócalo de carga, la batería recargable del Face Lifter también puede ser recargada alternativamente a través del cable USB incluido en el suministro (conectado, por ejemplo, a un ordenador).

#### 12. Estación de base

Sólo inicie el proceso de carga cuando la batería recargable se haya descargado completamente.



# INDICACIONES DE APLICACIÓN

Observe las siguientes indicaciones para las aplicaciones con el BYAS Face Lifter.

## Indicaciones generales

Antes de cada aplicación, limpie la piel como de costumbre. También remueva el maquillaje. Sólo después de esto, y dependiendo del programa seleccionado, aplique uno de los sueros especiales BYAS o el gel especial LIPOrelease® bien sea directamente sobre los electrodos de tratamiento duales del Face Lifter o sobre el área de la piel a ser tratada.

En cada programa debe tratar cada mitad del rostro consecutivamente durante respectivamente 1,5 minutos – 3 minutos por cada mitad del rostro en los programas NUTRI y MASK. A este respecto debe tener en cuenta que debajo de los electrodos de tratamiento duales del Face Lifter siempre debe haber suficiente cantidad de suero o gel, respectivamente. Si es necesario, aumente la cantidad empleada. Si durante el tratamiento del suero se integra completamente en la piel, en todo caso deberá usar suero adicional.

**En piel muy sensible, debería limitar la frecuencia de aplicación recomendada. Durante las primeras semanas, use como máximo el nivel "medium" como ajuste de intensidad.**

## Aplicaciones de iontoforesis / EEM

Después de que haya seleccionado un programa de iontoforesis o de EMS, proceda de la siguiente manera para el tratamiento: Coloque los electrodos de tratamiento duales del Face Lifter sobre la zona de la piel a ser tratada y lleve el Face Lifter con movimientos fluidos y uniformes desde la línea media del rostro hacia afuera.

## Aplicaciones de radiofrecuencia

**Si ha seleccionado el programa de radiofrecuencia, es indispensable que observe la siguiente secuencia de tratamiento:**

Coloque los electrodos de tratamiento duales del Face Lifter sobre la primera zona parcial de la superficie de piel a ser tratada. Presione durante 3-4 segundos con presión media sobre la piel. Después mueva el Face Lifter dos veces sucesivamente en forma circular sobre el sitio de tratamiento que tiene el tamaño aproximado de una ciruela. Luego coloque los electrodos de tratamiento duales sobre la siguiente zona parcial de tratamiento de la superficie de piel a ser tratada. Repita todo el procedimiento hasta que haya completado el tratamiento de la respectiva superficie de piel. De esta manera podrá asegurar el efecto óptimo del Face Lifter en un tratamiento de radiofrecuencia aplicado en la cara.

Durante el tratamiento de radiofrecuencia no sentirá ningún calor en particular que se genere sobre su piel. Esto se debe a que las ondas de radiofrecuencia del Face Lifter están adaptadas especialmente para la piel de la cara. De esta manera no producen una sensación térmica excesiva en los sensibles receptores que están presentes sobre todo en las capas superiores de la piel, pero aun así estimulan efectivamente la eliminación de acumulaciones adiposas en la profundidad de la piel y producen un estiramiento de las fibras de colágeno en el tejido conjuntivo.

**El BYAS Face Lifter funciona con el exclusivo sistema BYAS ATSEC (Automatic Temperature and Efficacy Control).** Con esto, durante los programas de RF tiene lugar una medición constante de la temperatura a través de los electrodos de tratamiento duales. Si se determina un exceso de la temperatura máxima programada, la potencia del Face Lifter es reducido automáticamente. Si nos alcanza la temperatura máxima, el sistema de control regula automáticamente paso a paso hasta alcanzar nuevamente la potencia máxima.



# PLAN DE APLICACIÓN

## SEMANA 1 - 8.

Los primeros resultados con el sistema BYAS SENSATION ya serán visibles después de poco tiempo. Sin embargo, los mejoramientos a largo plazo requieren algún tiempo, en particular hasta que los depósitos de hialurónico en su piel se hallan vuelto a restablecer completamente y se regenere la piel cansada.

Reducción de arrugas		
CLEAN	2-3x/semana	3 min.
NUTRI	2-3x/semana	6 min.
MASK	1x/semana	6 min.
DAY	diario	
NIGHT	diario	
CLEAN	3-4x/semana	3 min.
NUTRI	3-4x/semana	6 min.
MASK	1x/semana	6 min.
DAY	diario	
NIGHT	diario	
CLEAN	4x/semana	3 min.
NUTRI	4x/semana	6 min.
MASK	1x/semana	6 min.
DAY	diario	
NIGHT	diario	

Estiramiento de la piel y reducción de grasa		
LIFT / FIRM	1x/semana	3 min.
SHAPE / STRET	1x/semana	3 min.
LIFT / FIRM	2x/semana	3 min.
SHAPE / STRET	2x/semana	3 min.
LIFT / FIRM	2x/semana	3 min.
SHAPE / STRET	2x/semana	3 min.

Haga las aplicaciones de iontoforesis (CLEAN / NUTRI / MASK) siempre en los días en que no vaya a efectuar ninguna aplicación de EEM o RF. **En piel muy sensible, debería limitar la frecuencia de aplicación recomendada. Durante las primeras semanas, use como máximo el nivel "medium" como ajuste de intensidad.** En caso de observar reacciones cutáneas tras las aplicaciones, le recomendamos consultar a un médico por precaución.

# INDICACIONES DE ADVERTENCIA Y USO

PARA USAR EL FACE LIFTER DE FORMA CORRECTA, POR FAVOR OBSERVE LAS SIGUIENTES INDICACIONES.

- Antes de aplicar el Face Lifter, quítese todas las joyas metálicas (anillos, piercings, etc.).
- El Face Lifter no debería usarse cerca de aparatos terapéuticos de ondas cortas o de microondas, así como tampoco aparatos de alta frecuencia móviles (por ejemplo, teléfonos móviles), ya que se pueden producir variaciones en los valores iniciales. Se debería guardar una distancia de por lo menos 1 m.
- Para una aplicación con el Face Lifter, use exclusivamente los productos especiales BYAS. Los sueros especiales ionizados BYAS y el BYAS Face Lifter están específicamente armonizados entre sí. Sólo a través de esta particular interacción es posible alcanzar el transporte profundo del complejo de ácido hialurónico y de agentes activos especiales conjuntamente con los componentes activos especializados adicionales. Esto no es posible con otros productos que no hayan sido especialmente ionizados (cosméticos, medicamentos o similares). También en las aplicaciones de RF, tan sólo el gel especial BYAS con el complejo de sustancias activas LIPOrelease® apoya el efecto del Face Lifter. Esto no es posible con otros geles que no disponen de las propiedades especiales de inhibición de la acumulación de grasa y de estimulación de la eliminación de grasa.
- Vigile que siempre se mantenga suficiente suero o gel debajo de los electrodos de tratamiento duales del Face Lifter, con el fin de prevenir posibles irritaciones cutáneas. Si es necesario, aumente la cantidad utilizada. En particular si experimenta una sensación de calor intenso sobre la piel durante el tratamiento de RF, deberá incrementar la cantidad de gel empleada.
- Evite el contacto del suero, el gel y los electrodos de tratamiento duales del Face Lifter con los globos oculares, párpados y mucosas. Los sueros y el gel están destinados exclusivamente para la aplicación tópica externa sobre la piel.
- Con los programas de EEM y RF se deben mantener 2 días de tratamiento por semana. Asimismo, siempre se debería intercalar un día libre de tratamiento.
- En los tratamientos de iontoforesis debe observar los siguientes tiempos de tratamiento total:  
En días libres de MASK > máximo 9 minutos por zona de piel (CLEAN = 3 min., NUTRI = 6 min.) en un día. En el día con MASK > máximo 15 minutos por zona de piel (CLEAN = 3 min., NUTRI = 6 min., MASK = 6 min.).
- Con los programas de EEM LIFT y FIRM y los programas de RF SHAPE y STRET, no debe tratar una zona de piel dos veces el mismo día. Observe un tiempo de tratamiento total de respectivamente 3 minutos por zona de piel en un mismo día.
- Almacene el Face Lifter y los sueros fuera del alcance de los niños. No almacene los sueros y el gel a una temperatura mayor de 25 °C.
- Si en las aplicaciones se presentan reacciones cutáneas, será de su propia responsabilidad consultar preventivamente a un médico.
- Almacene el Face Lifter en un lugar seco. El aparato no es hermético al agua. No lave el aparato con agua y tampoco lo mantenga bajo un chorro de agua corriente.
- Limpie los electrodos de tratamiento duales con un paño húmedo después de cada aplicación. Para ello, el aparato siempre deberá estar completamente desconectado. No use sustancias limpiadoras químicas o agresivas.
- Mantenga todos los contactos limpios, libres de polvo y secos.
- El Face Lifter no debe ser utilizado durante un proceso de carga de batería.
- Los trabajos de servicio sólo pueden ser realizados por personas o empresas autorizadas.

# CONTRAINDICACIONES

EL FACE LIFTER NO PUEDE SER UTILIZADO EN DETERMINADAS SITUACIONES.

(ESTO RIGE TANTO PARA EL CASO DE QUE USTED EMPLEE EL FACE LIFTER PARA SÍ MISMO O SI VA A USAR EL FACE LIFTER PARA TRATAR A OTRAS PERSONAS).

- En personas que portan un marcapasos cardíaco o un ICD (cardiodesfibrilador implantado).
- En personas con dispositivos intrauterinos metálicos (espirales), con implantaciones metálicas en la zona de flujo de la corriente o con materiales de relleno permanentes en la zona de tratamiento.
- En personas que presenten una hiperfunción tiroidea, en la zona anterior del cuello y en la zona del pecho.
- En personas con esclerosis múltiple.
- En personas que estén embarazadas o en período de lactancia.
- En personas que en el área de tratamiento presenten una zona de piel enferma (maligna) u operada.
- En personas que actualmente padezcan de enfermedades severas, tales como enfermedades cardíacas
- En personas que tengan un sistema inmune debilitado, debido a enfermedades inmunosupresoras o debido a la toma de agentes inmunosupresores.
- En personas que presenten un cuadro patológico activable por calor, tales como un herpes simplex recidivante (en la zona de tratamiento).
- En personas que presenten síntomas cutáneos sobre la piel en la zona de tratamiento que contraindiquen el tratamiento, tales como excoiraciones, psoriasis, eczemas o erupciones.
- En personas que en los últimos 3 meses se hayan sometido a una intervención quirúrgica en la zona de tratamiento, un tratamiento con rellenos inyectables que contienen toxina de botulina, un tratamiento de láser o una descamación profunda, o en las que las secuelas de tal intervención o tratamiento todavía no hayan desaparecido completamente.
- Menores de 18 años.
- **Indicación:** Los tatuajes en la zona de tratamiento en particular podrían cambiar su forma cuando se empleen programas de radiofrecuencia, ya que la piel por ejemplo se puede contraer debido al efecto térmico.

## Tenga en cuenta lo siguiente:

Sólo usted conoce sus propios antecedentes de salud. Por lo tanto, el uso del BYAS Face Lifter y de los productos de cuidado especiales BYAS a este respecto en principio se encuentra bajo su propia responsabilidad. Si tiene dudas en relación a la aplicabilidad de los productos o a posibles efectos secundarios, le recomendamos que en todo caso consulte a un médico.

## Si efectúa tratamientos con el Face Lifter en otras personas, es indispensable que observe el siguiente procedimiento:

1. Con una mano establezca contacto físico con la piel de la persona que esté tratando. Sólo así se asegura el flujo de corriente requerido en los tratamientos de iontoforesis.
2. Siempre coloque una almohadilla de algodón bien humedecida sobre la zona de piel que esté tocando y sus dedos o mano, a fin de protegerse a sí mismo y a la persona tratada contra posibles enrojecimientos que pudieran ser causados por el flujo de la corriente.
3. Para el ajuste de intensidad en tratamientos de iontoforesis, seleccione como máximo el nivel (M) MEDIUM.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Por este medio declaramos que el BYAS Face Lifter y el BYAS Eye Lifter corresponden a las directivas de las ordenanzas UE 2011/65/UE (Limitación de uso para sustancias en aparatos eléctricos y electrónicos), 2014/30/UE (Tolerancia electromagnética) y 2014/35/UE (Directiva de baja tensión) y por lo tanto están autorizados para la venta en los Estados de la Unión Europea. Declaramos la aptitud de libre tráfico de los aparatos BYAS a través de las correspondientes marcas CE. Declaramos además que también los productos de cuidado especiales de la línea de productos cosméticos BYAS corresponden a las directivas de la ordenanza UE 1223/2009 (Ordenanza sobre cosméticos de la UE) y por lo tanto están autorizados para la venta en los Estados de Unión Europea.



DESCARGA  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
COMPLETO BYAS FACE LIFTER:

[HTTP://WWW.WELLSTAR-COMPANY.COM/  
DOWNLOAD.HTML](http://www.wellstar-company.com/download.html)



WELLSTAR GMBH & CO. KG  
Charlottenstraße 4 | 10969 Berlin | Alemania  
Tel.: +49 (0)30. 47 37 28 - 0 | Fax: +49 (0)30. 47 37 28 - 11  
[www.wellstar-company.com](http://www.wellstar-company.com)

BYAS®, BYAS SENSATION®, Face Lifter®, BYAS MOVE®, MPST®, LSICT®, HLIFT®, LF-EMS®, HRF-TAS®, ATSEC®, HIIMT®, BIOS AGE® y LIPOrelease® son marcas de fábrica registradas.

© Reservados todos los derechos por la WellStar GmbH. Cualquier reproducción o edición que exceda del marco establecido por los derechos de autor no está permitida sin una previa autorización por escrito.

Art. Nr.: xxxx | 06.2016

